



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER




LABORHITS

Taladro de Muestreo Para Material Pedunculado



Para Silo o Paca

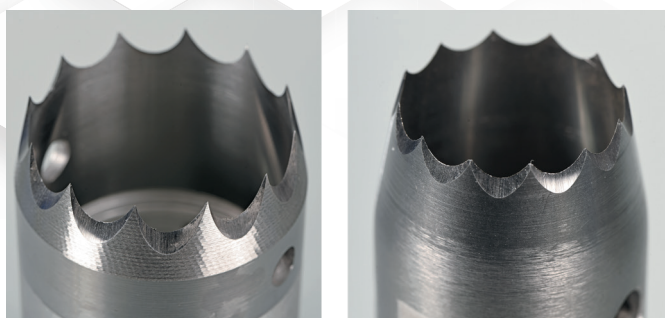

La barrena de muestreo para material pedunculado es un muestreador especial para heno, ensilado, paja, hierbas, arbustos u otros materiales secos vegetales pedunculados en los que otras barrenas se enredan rápidamente. La geometría especial de la punta de la broca corta eficaz y rápidamente diferentes materiales pedunculados.

La robusta y duradera broca tubular está fabricada completamente en acero inoxidable 1.4404/1.4034 o aluminio/acero inoxidable 1.4034. El práctico eyector ayuda a vaciar la muestra de la broca.

- Muestreo sencillo y rápido en el silo o en la paca
- Para plantas herbáceas, plantas enteras, ensilado y similares
- Muestreo sin esfuerzo con soporte mecánico (taladro o destornillador inalámbrico)

Capacidad nominal ml	Dimensiones (Ø x Longitud) mm	Material	Ud.E	Código
70	25 x 200	Acero inoxidable 1.4404/1.4034	1	4.688 172
140	25 x 400	Acero inoxidable 1.4404/1.4034	1	4.688 173
270	45 x 200	Aluminio/acero inoxidable 1.4034	1	4.688 174
530	45 x 400	Aluminio/acero inoxidable 1.4034	1	4.688 175